


VistaScan Mini Easy, compacto e resistente

Tecnologia de placas de fósforo PCS da Dürr Dental líder de mercado

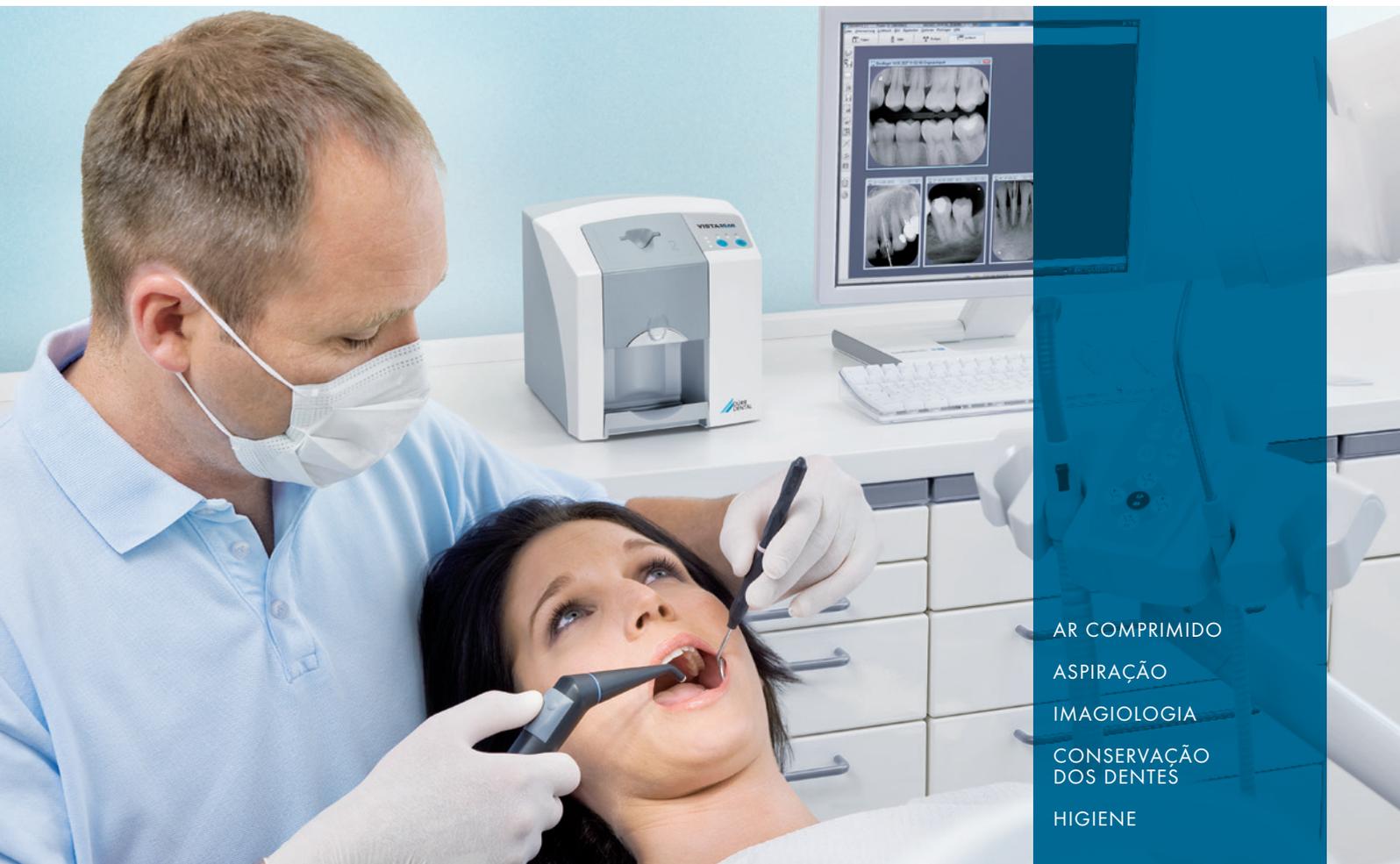

AR COMPRIMIDO
ASPIRAÇÃO
IMAGIOLOGIA
CONSERVAÇÃO
DOS DENTES
HIGIENE

VistaScan Mini Easy – compacto e fácil

O VistaScan Mini Easy simplifica consideravelmente a imagiologia na cirurgia: Com a engenharia comprovada e a característica qualidade de imagem extraordinária dos scanners de placas de fósforo Dürr Dental em todo o mundo. Fabricado na Alemanha.



Scanner de placas de fósforo VistaScan Mini Easy

Desde a introdução do processamento de películas radiográficas convencionais na odontologia, a Dürr Dental tem liderado o caminho de diagnóstico em exames radiográficos odontológicos. Radiografia digital com a Dürr Dental oferece aos dentistas imagens em alta resolução para atender a todas as necessidades de diagnóstico. Mais de 40 anos de experiência no desenvolvimento de tecnologias para exames radiográficos levam a soluções inovadoras e orientadas para a prática. O scanner de placas de fósforo VistaScan Mini Easy torna o diagnóstico através de placas de fósforo ainda mais rápido para os dentistas. O dispositivo compacto é particularmente fácil de utilizar e requer um espaço mínimo – permitindo a sua instalação na sala de tratamento. Vantagem: tomada radiográfica e digitalização podem ser feitas na mesma sala. As placas de fósforo reutilizáveis do VistaScan são lidas em altíssima qualidade em poucos segundos. Nunca houve um momento tão oportuno para mudar para placas de fósforo.



Película analógica




Concorrência (14 bit)



VistaScan (16 bit)

A gama de níveis de cinza da placa de fósforo do VistaScan oferece uma representação tão boa quanto a de uma película


Placas de fósforo melhores do que sensores!*

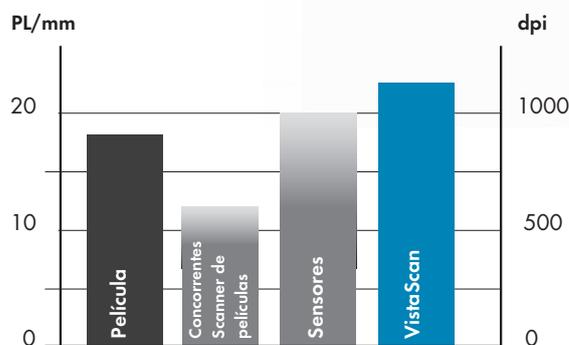

A resolução de imagem efetiva de sistemas radiográficos em comparação: os sistemas VistaScan da Dürr Dental atingem a resolução mais elevada em comparação com a concorrência. Os mais recentes estudos mostram que a tecnologia de placas de fósforo é a única forma segura de digitalização sem comprometimentos.



Imagens em alta resolução com baixo ruído auxiliam num diagnóstico seguro

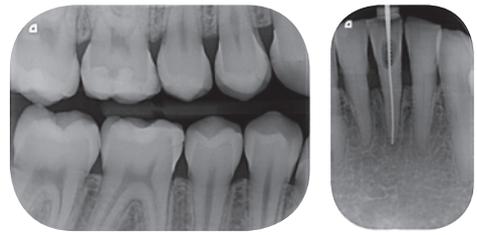

Tamanhos mais usados

O VistaScan Mini Easy trabalha com os tamanhos mais comuns de placas de fósforo (0 e 2 - periapical infantil e adulto). Além disso, as placas de fósforo possuem 100 % de área útil. Manuseio fácil - tal como com uma película convencional.



Fácil Manuseio

O sistema de apagamento integrado do VistaScan permite que a placa de fósforo possa ser usada novamente logo após o processo de leitura. O equipamento pode ser instalado dentro da sala de Raio-X e em apenas 6 segundos a imagem já está disponível.




Aspectos importantes:

- Formação da imagem em poucos segundos
- Design compacto
- Ideal para o consultório
- Sofisticação na aquisição de imagem
- Conexão via USB ou cabo de rede
- Excelente qualidade de imagem
- Dois tamanhos de placas intraorais

Fácil Integração

O VistaScan Mini Easy pode ser utilizado com o software DBSWIN ou com outros softwares através de plugins ou drivers Twain. Assim, o Mini Easy pode ser facilmente integrado via porta USB ou cabo de rede a qualquer sistema que já estiver em uso na clínica.

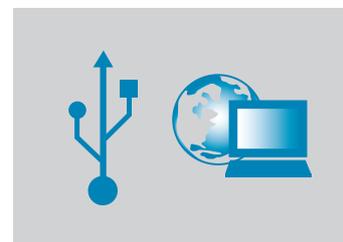

Especificações

| VistaScan Mini Easy | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Tamanhos de película | 0 (2 x 3 cm) + 2 (3 x 4 cm) |
| Resolução real (PL/mm, dpi) | 22, 1100 |
| Resolução teórica (PL/mm, dpi) | 40, 2000 |
| Peso (kg) | 6,5 |
| Dimensões (C x L x P mm) | 226 x 234 x 243 |
| Função Standby | Sim |
| Interfaces | USB/rede |



Posicionadores

Graças aos seus rebordos chanfrados e arredondados, os posicionadores de placas de fósforo da Dürr Dental oferecem uma excelente proteção à placa de fósforo. Os posicionadores estão disponíveis para todas as regiões da boca e ajudam na produção de radiografias precisas.

Desinfecção com FD 350, FD 333

Os lenços desinfetantes FD 350 da Dürr Dental são particularmente adequados para a desinfecção e limpeza de produtos médicos. Graças ao seu tamanho são ideais e econômicos para desinfecção de pequenos objetos, como por exemplo invólucros de placas e películas intraorais, peças de mão e adaptadores, etc. - Já vem pronto para usar. Desinfecção rápida e livre de resíduos. Uma solução virucida de amplo espectro é oferecida pelos lenços desinfetantes FD 333.

Lenços de limpeza de placas de fósforo

Os lenços de limpeza de placas de fósforo VistaScan podem ser utilizados para limpar placas de fósforo quando necessário e possuem também um efeito desinfetante. Vantagem: uma imagem de excelente qualidade e mantida por muito mais tempo.